

MÁY CHĂM SÓC DA MẶT FCE90



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm ELLE by Beurer FCE90 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSĐ trước khi sử dụng sản phẩm.

Máy chăm sóc da mặt FCE90 là một thiết bị chăm sóc da mặt chuyên nghiệp với công nghệ ion hóa giúp nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, cải thiện cấu trúc da và tăng cường lưu thông máu. Việc điều trị bằng máy chăm sóc da mặt FCE90 cũng kích thích tái tạo tế bào biểu bì cho da mặt, góp phần tạo nên làn da tươi sáng và mịn màng hơn cho người sử dụng.

Sản phẩm bao gồm:

- 1 Máy chăm sóc da mặt FCE90
- 1 Bộ sạc
- 1 Sữa rửa mặt (Intensive Ceansing Milk (30 ml)
- 1 Kem cấp nước chuyên sâu cho da mặt (Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) (Bạn có thể đặt kem và sữa rửa mặt với dung tích lớn hơn, thuận lợi

cho việc sử dụng lâu dài bằng cách liên hệ đặt hàng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi bằng cách trích dẫn các số thứ tự 163,394; 163,392.)

- 1 Hướng dẫn sử dụng

1. Hướng dẫn sử dụng an toàn

Không được sử dụng các thiết bị:

- Trên vết thương hở
- Tại vùng mắt hoặc miệng hay trên bất kỳ phần nào khác của cơ thể ngoài khuôn mặt.
- Nếu bạn đang mắc bệnh về da, cấp tính hoặc mạn tính, tại vùng da bị thương hoặc bị kích ứng, ví dụ như viêm da, phát ban, dị ứng, bồng, bầm tím, sưng phồng, cũng như các vết thương hở)
- Chỉ sử dụng các thiết bị ở nơi khô ráo (không sử dụng trong phòng tắm, phòng xông hơi).
- Không chạm vào thiết bị đã bị ngập trong nước. Ngắt kết nối các bộ chuyển đổi nguồn điện ngay lập tức.
- Không làm rơi hoặc để thiết bị chịu bất kỳ tác động nào từ bên ngoài.
- Không kẹp hoặc bó chặt cáp nguồn.
- Đảm bảo rằng các bộ chuyển đổi nguồn điện cáp và đường ống không tiếp xúc với nước, hơi nước hoặc các chất lỏng khác.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

2. Mô tả thiết bị.



1) Đầu điều trị	5) Nút ion dương
2) Màn hình hiển thị LCD	6) Nút nhiệt
3) Nút ON / OFF	7) Nút làm mát
4) Nút ion âm	

3. Hướng dẫn sử dụng.

Trước khi sử dụng FCE90 cho việc trị liệu da, hãy đảm bảo rằng da của bạn không bị kích ứng với các sản phẩm đi kèm của máy bằng cách thực hiện thử nghiệm sau:

- Rửa sạch vùng da ở cổ tay/phía bên trong khuỷu tay và thoa 2 loại sản phẩm đi kèm máy FCE90 lên đó, để cho dung dịch thẩm thấu vào da.
- Nếu vùng da được thử nghiệm có dấu hiệu kích ứng trong vòng 48 giờ, ngưng sử dụng 2 sản phẩm này cho da mặt. Nếu

không có kích ứng da trong khoảng thời gian này, sản phẩm hoàn toàn an toàn để sử dụng.

- Không thử nghiệm ở vùng da quanh mắt.

Lưu ý:

- Trong thời gian điều trị, giữ thiết bị sao cho bàn tay của bạn bao trọn cả hai sọc mạ crôm màu ở phía bên của thiết bị. Nếu bạn không làm điều này, các mạch điện sẽ mở và các chức năng ion hóa sẽ không được tốt.


Các ứng dụng điều trị da:

- Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất có thể, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm được cung cấp khi sử dụng chức năng làm sạch da và chống lão hóa.
- Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chức năng chăm sóc/điều trị vào buổi sáng và kết hợp của chức năng làm sạch và chăm sóc/điều trị da vào buổi tối.

Chăm sóc chức năng điều trị (buổi sáng): giai đoạn gia nhiệt trước.

4. Các chức năng điều trị da

4.1. Chức năng chăm sóc và điều trị da (Buổi sáng).

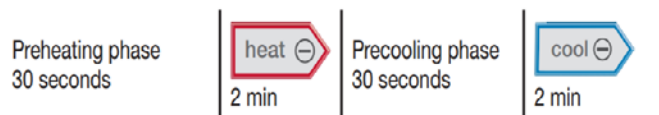

- Thoa kem Advanced Hydro Lift lên vùng da bạn muốn điều trị.
- Nhấn nút ON / OFF trên thiết bị.
- Nhấn nút nhiệt, sau đó nhấn vào nút ion âm. Thiết bị này hiện đang trong giai

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte.eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte.eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

đoạn gia nhiệt trước (Preheating) trong khoảng 30 giây.

- "WAITING" được hiển thị trên màn hình. Ngay sau khi màn hình "WAITING" tắt, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
- Bây giờ sử dụng đầu điều trị để massage nhẹ nhàng khuôn mặt của bạn theo chuyển động tròn.
- Sau 2 phút điều trị, nhấn nút làm mát và nút ion âm. Thiết bị này hiện đang trong giai đoạn làm mát (Precooling) trong 30 giây.
- "WAITING" được hiển thị trên màn hình. Ngay sau khi màn hình "WAITING" tắt, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng. Tiếp tục điều trị trong 2 phút nữa.
- Để tắt thiết bị này, nhấn ON/OFF một lần nữa

4.2. Chức năng làm sạch sâu kết hợp cùng chăm sóc và điều trị da (Buổi tối).

a. Làm sạch sâu:


Cleansing:

Preheating phase
30 seconds



- Thoa sữa rửa mặt
- Nhấn nút ON / OFF trên thiết bị.
- Thực hiện giai đoạn Preheating như hướng dẫn phía trên.
- Sau 3 phút, nhấn nút ion dương và tiếp tục điều trị trong 1 phút nữa. Sau khi điều trị làm sạch, rửa mặt bằng nước ấm.

b. Chăm sóc da mặt:

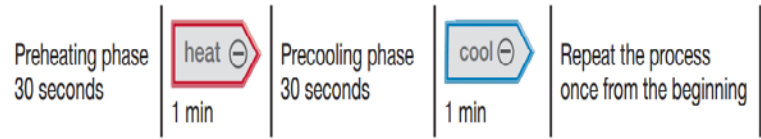

Sau khi bạn đã hoàn thành các chức năng điều trị làm sạch, tiếp tục với chức năng chăm sóc da như sau:

- Làm sạch đầu điều trị bằng vải bông sạch
- Thoa kem Advanced Hydro Lift lên vùng da bạn muốn điều trị.
- Thực hiện giai đoạn Preheating như hướng dẫn phía trên.
- Sau 1 phút điều trị, thực hiện giai đoạn Precooling như hướng dẫn phía trên và tiếp tục điều trị trong 1 phút nữa.
- Thực hiện lại quy trình Chăm sóc da mặt như trên 1 lần nữa.
- Để tắt thiết bị này, nhấn ON/OFF một lần nữa.