

ĐAI MASSAGE MG148



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Beurer MG148 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HSDS trước khi sử dụng sản phẩm.

Với sự hỗ trợ của thiết bị Gói massage điện này, bạn đã mang lại cho mình dịch vụ mát hiệu quả và dễ chịu. Mát-xa có thể vừa thư giãn và kích thích, và được phổ biến để điều trị các cơ bắp cứng hoặc căng thẳng, đau đớn và mệt mỏi. Thiết bị này cung cấp massage mạnh mẽ và chuyên sâu cho cổ và lưng.

Thiết bị này là dành cho chỉ sử dụng cá nhân và không được dùng cho mục đích y tế hoặc thương mại. Ngoài ra, các thiết bị massage MG148 cung cấp những ưu điểm sau:

- Vận hành đơn giản
- Cơ chế chuyển động massage 2 chiều
- Đai lưng có thể điều chỉnh
- Chức năng nhiệt và ánh sáng

1. Cảnh báo.

Thiết bị này chỉ dành cho các xoa bóp các bộ phận riêng biệt của cơ thể con người. Nó không thể thay thế điều trị y tế.

Không sử dụng các thiết bị massage nếu có những lời cảnh báo sau đây áp dụng cho bạn. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn có hay không các thiết bị massage là thích hợp cho bạn.

Lưu ý:

Sử dụng các thiết bị massage bị cấm trong các trường hợp sau đây:

- Không sử dụng cho trẻ em
- Không có thay đổi do bệnh tật hoặc chấn thương trong khu vực trị liệu (ví dụ như vấn đề đĩa đệm, vết thương hở),
- Không bao giờ sử dụng các thiết bị massage để xoa bóp cho khu vực trung tâm của những người đang sử dụng máy trợ tim. Nếu sử dụng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các thiết bị massage trên các bộ phận khác của cơ thể.
- Không bao giờ sử dụng các thiết bị massage trên da hoặc bộ phận cơ thể bị sưng, bị bỏng hoặc bị viêm.
- Thiết bị massage không được sử dụng trên vết thương hở, mao mạch, giãn tĩnh mạch, mụn trứng cá và bệnh ngoài da khác.
- Thiết bị massage không được sử dụng trong thai kỳ.
- Không sử dụng các thiết bị massage trên mặt (mắt), trên thanh quản hoặc trên các bộ phận đặc biệt nhạy cảm khác của cơ thể.
- Không sử dụng thiết bị để massage bàn chân.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị trong khi bạn đang ngủ.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

- Không bao giờ sử dụng các thiết bị sau khi uống thuốc hoặc uống rượu (giảm mức độ nhận thức).
- Không được trang bị để sử dụng trên xe.

Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần bị hạn chế.

Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.

Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong các hướng dẫn hoạt động. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết quả của việc sử dụng không phù hợp hoặc bất cẩn.

Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện khác, thiết bị massage này phải được xử lý thận trọng và sự quan tâm để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.


Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau:

- Chỉ sử dụng với điện áp định mức.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị khi có giông bão. Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện.
- Không bao giờ kéo cáp điện hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối cung cấp điện từ nguồn điện ổ cắm.
- Sửa chữa các thiết bị điện chỉ được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn. Sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm người sử dụng. Trong trường hợp sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng

tôi hoặc một đại lý ủy quyền.

- Nếu các đơn vị cung cấp điện hoặc dây điện bị hỏng, phải được thay thế kịp thời bởi một đại lý ủy quyền.

2. Mô tả thiết bị

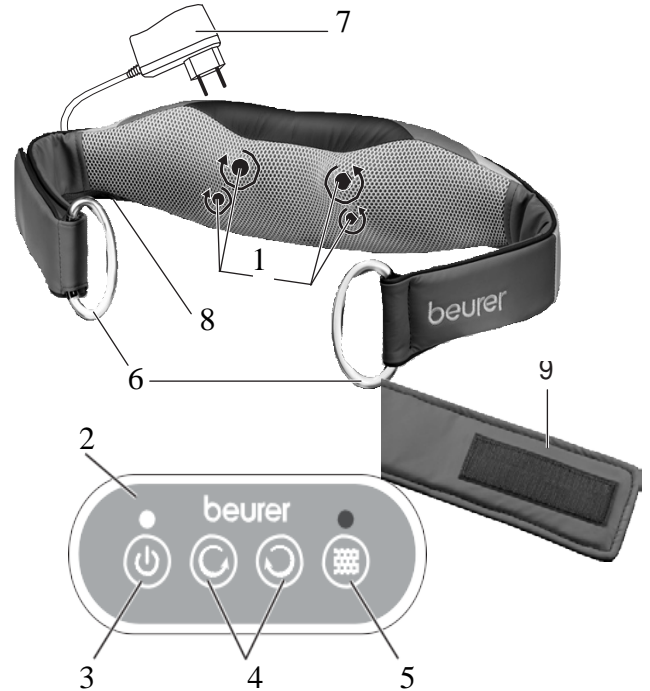

1. 4 đầu massage (2 đầu nhiệt và 2 đầu hồng ngoại), chuyển động theo cặp	5. Nút chức năng (điều chỉnh nhiệt)
2. Bảng điều khiển	6. Tay cầm
3. Nút nguồn	7. Ổ cắm chính
4. Nút chuyển động (theo chiều kim đồng hồ & ngược chiều kim đồng hồ)	8. Dây cáp điện (được đặt dưới vỏ thiết bị)
	9. Đai lưng đi kèm (dùng để điều chỉnh nếu độ dài đai massage quá ngắn đối với người sử dụng)

3. Hướng dẫn sử dụng

- Bật thiết bị massager bằng nút nguồn các đầu massage bắt đầu xoay tròn.
- Tiếp theo, nhấn nút hoặc để kích hoạt các hướng massage mong muốn.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT


Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

- Bạn có thể bật chức năng nhiệt riêng biệt bằng cách nhấn nút nhiệt 
- Bấm nút chức năng hoặc nút nguồn lần nữa để tắt chức năng hoặc thiết bị.

Lưu ý:

- Ngồi thoải mái, dùng massage hoặc thay đổi vị trí massage hoặc áp lực lên thiết bị nếu bạn cảm thấy đau đớn hay khó chịu.
- Không sử dụng thiết bị massage lâu hơn 15 phút. Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể quá kích thích các cơ bắp và gây ra căng thẳng thay vì thư giãn.
- Thiết bị này có chức năng tắt máy tự động, được thiết lập với thời gian hoạt động tối đa 15 phút.
- Thiết bị cũng sẽ tự ngắt khi thiết bị quá nóng. Trong trường hợp này, hãy để thiết bị nguội bớt trong khoảng 30 phút trước khi tiếp tục sử dụng

4. Bảo quản và lưu trữ.

- Luôn ngắt kết nối với thiết bị trước khi làm sạch thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phương pháp được quy định để làm sạch thiết bị. Không được để bất cứ chất lỏng nào xâm nhập vào thiết bị hoặc các phụ kiện.
- Vết bẩn nhỏ có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một miếng vải hoặc miếng bọt biển ẩm, và một số chất tẩy rửa nhẹ khi cần thiết. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch nào mang tính ăn mòn cao.
- Ngưng sử dụng thiết bị này cho đến khi nó khô hoàn toàn.

5. Sự cô kỹ thuật và biện pháp khắc

phục.

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Đầu massage quay với tốc độ chậm	Tải trọng trên đầu massage là quá lớn.	Nhả đầu massage.
Đầu massage không chuyển động	Thiết bị không kết nối với nguồn điện.	Kết nối thiết bị với nguồn điện và bật lại máy.
Đai massage không vừa vặn với người sử dụng	Độ dài đai massage là quá ngắn với người sử dụng	Lắp thêm đai lưng đi kèm

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>